

# Garantie

Produkt: Healax i shoulder, Modell: CGM ESA-SD1501

Garantie für das oben beschriebene Produkt gemäß den Bestimmungen des Verbraucherschutzgesetzes.

<b>Produktionsnummer</b>			
<b>Kaufdatum</b>			
<b>Garantiezeit</b>			
<b>Angaben Zum Kunden</b>	<b>Name</b>	<b>Telefonnummer</b>	
	<b>Adresse</b>		
<b>Kauf Ort</b>	<b>Center Name</b>	<b>Telefonnummer</b>	

Falls Sie keine Produktgarantie haben oder die erforderlichen Felder nicht ausgefüllt haben, haben Sie entweder Anspruch auf eine kostenlose Reparatur oder der Kundendienst wird gemäß der zusätzlichen Standards für die Qualitätsgewährleistungsperiode berechnet.

Wenn das Produkt ausfällt, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie es gekauft haben.

Wenn Ihr Händler das Problem nicht beheben kann, wenden Sie sich an den Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.

## Standard für Kundendienst-Unterstützung

1. Die Garantie für dieses Produkt beträgt 2 Jahr.
2. Wenn das Produkt bei normalem Betrieb innerhalb der 2-jährigen Garantieperiode (gerechnet ab dem Kaufdatum des Produkts) plötzlich ausfällt, haben Sie Anspruch auf eine kostenlose Reparatur. Die Reparatur wird Ihnen jedoch auch während der Garantiezeit in Rechnung gestellt, wenn Folgendes zutrifft:

- Ausfall oder Beschädigung durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt
- Ausfall oder Beschädigung durch Naturkatastrophen
- Ausfall durch Nichteinhaltung der Bedienungs- und Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung
- Ausfall durch nicht genehmigte Reparatur oder Änderung durch den Kunden
- Verbrauchsmaterialien, deren Lebensdauer zu Ende ist
- Ausfall in einer Umgebung, die außerhalb des in der Produktgarantie angegebenen Bereichs liegt
- Anderer anormaler Betrieb aufgrund von Verbindungen zu Produkten anderer Hersteller

3. Diese Garantie gilt nur im Inland. Da sie nicht erneut ausgestellt wird, müssen Sie sie sorgfältig aufbewahren.

Diese Garantie sichert eine kostenlose Reparatur gemäß den oben genannten Bedingungen innerhalb des oben genannten Zeitraums zu. Daher beschränkt sie nicht die gesetzlichen Rechte des Kunden. Bei Fragen zur Reparatur nach Ablauf der Garantieperiode kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder wenden sich an den Kundendienst.

## Ceragem Co., Ltd.

10, Jeongja 1-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu,  
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea  
TEL : (82)41-523-2550 FAX : (82)41-523-2560

## Bedienungsanleitung

CGM ESA-SD1501



Disposal of Old Electrical  
& Electronic Equipment  
Applicable in the European  
Union and other European  
countries with separate  
collection systems.





## Sicherheitshinweise



### WARNUNG

- Lassen Sie das Gerät während der Benutzung nicht mit der exponierten Haut in Berührung kommen, um Verbrennungen oder Abrieb zu vermeiden.
- Stoppen Sie sofort, wenn Sie irgendwelche Schmerzen oder Unannehmlichkeiten fühlen.
- Nicht auf verletzten Gebieten oder bei Personen mit akuten Krankheiten, bösartigen Tumoren, Hoher Fieber oder Hautkrankheit.  
Solche Personen sollten vor dem Gebrauch einen Arzt konsultieren.
- Minderjährige sollten nur unter der Leitung ihrer Eltern oder eines Erwachsenen, die überwachen können, verwenden.
- \* Unangemessene Produktnutzung kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht während der Autofahrt.



### Vorsicht


- Verwenden Sie nur einen qualifizierten Adapter (DC 12V / 2.5A), und überprüfen Sie entsprechenden Spannungen.
- Schließen Sie das Gerät vor dem Gebrauch ordnungsgemäß an den Adapter an.
- Ziehen Sie nicht die Adapterstecker von dem Produkt mit übermäßiger Kraft.
- \* Ein fehlerhafter Adapter oder eine falsche Verbindung kann das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen wie im Bad.
- \* Produktschäden, eine Zunahme des Lärms und / oder eine Abnahme der Haltbarkeit des Produktes.
- Die Vorrichtung kann überhitzen und den Betrieb einstellen, wenn kontinuierlich für 3 Stunden oder mehr verwendet.
- Wird ein Mangel entdeckt, zerlegen Sie das Gerät nicht selbst, wenden Sie sich an Kundendienst.
- Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Personen, die unempfindlich gegenüber Hitze sind, müssen beim Gebrauch des Gerätes vorsichtig sein.

## Produkt Eigenschaften

- Spezielle Massagekugeln verwendet, um das Gefühl einer Fingerdruckmassage zu schaffen
- Massage Richtung schaltet sich automatisch Vorwärts / Rückwärts nach ca. 1 Minute.
- Ermöglicht die Anpassung von Wärme und Intensität in 3 Stufen: hoch, mittel und niedrig
- Ergonomisch und Komfort für einfache Bedienung
- Hochwertige Polyurethan Bezug
- Sicherheitsvorrichtungen für die Überhitzung
- Eine Warnungston ertönt, wenn der Motor mit Gewalt während des Gebrauchs gestoppt wird.



## Verwendung des Bedienfelds

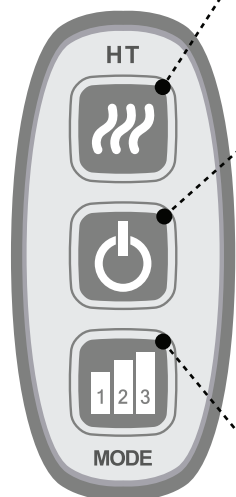

### HT(Heizen) Taste

- Sie können den Heizlampe ein- / ausschalten während der Verwendung.
- Drücken Sie einmal die Taste, um die Heizlampe auszuschalten.
  - Drücken Sie erneut die Taste, um die Heizlampe einzuschalten.

### Ein/Aus Taste

- Sie können das Produkt ein- / ausschalten.
- Drücken Sie die Taste für 3 Sekunden lang um das Produkt auszuschalten.
  - Drücken Sie die Taste kurz während der Verwendung, die Massagerichtung ändert sich.
  - Der Timer ist auf 15 Minuten voreingestellt und stoppt das Programm automatisch nach dieser Zeit.

### Intensität Taste

- Sie können die Intensität selbst einstellen, während der Verwendung.
- Intensität ist voreingestellt auf (Stufe 1) und kann nach Bedarf höher eingestellt werden.

## Das Produkt wird an folgenden Personen empfohlen

- Personen, die längere Zeit Auto fahren
- Ältere Personen
- Studenten, die vom Studium erschöpft sind
- Hausfrauen, die von Haushaltarbeiten erschöpft sind
- Menschen, die ganzen Tag am Schreibtisch arbeiten

## Produktspezifikationen

<b>Name des Produkts</b>	Healax i shoulder
<b>Name des Modells</b>	CGM ESA-SD1501
<b>Nennspannung</b>	DC 12V / 2.5A
<b>Nennleistung</b>	25W
<b>Nennbetriebsdauer</b>	15 Minuten (Dauerbetrieb 60 Minuten)
<b>Bezugsmaterial</b>	Polyurethane
<b>Größe</b>	40x31.5x16(cm)
<b>Gewicht</b>	1.7kg / 2.5(mit Verpackung)

- ※ Das Design und Produktspezifikation kann ohne Ankündigung abweichen, im Falle einer Qualitätsverbesserung
- ※ Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden gemäß Unternehmensumständen.